



iFIX



iFIX

Produkt Katalog

V_2.7_DE

x **Die Zukunft
der
Patientenpositionierung
gestalten**

+


Ihr iFIX Produktkatalog

iFIX ist der patentierte Einweg-Klettverschlusslösung für schnelle und hygienische Patientenpositionierung in jeder Art von medizinischer Einrichtung, vom MR bis in den Bildgebungsraum.

Hier finden Sie den kompletten Katalog der iFIX Produktgruppe, organisiert nach Produktgruppen.

iFIX passt zu jedem Standard-Tisch auf dem Markt. Wenn Sie auf der Suche für einem speziellen Tisch-Typ sind, werfen Sie bitte einen Blick auf die endlose iFIX-Möglichkeiten, im letzten Abschnitt dieses Katalogs.

Für Fragen und weitere Informationen zur iFIX Produktlinie, wenden Sie sich an Ihren iFIX-Händler.

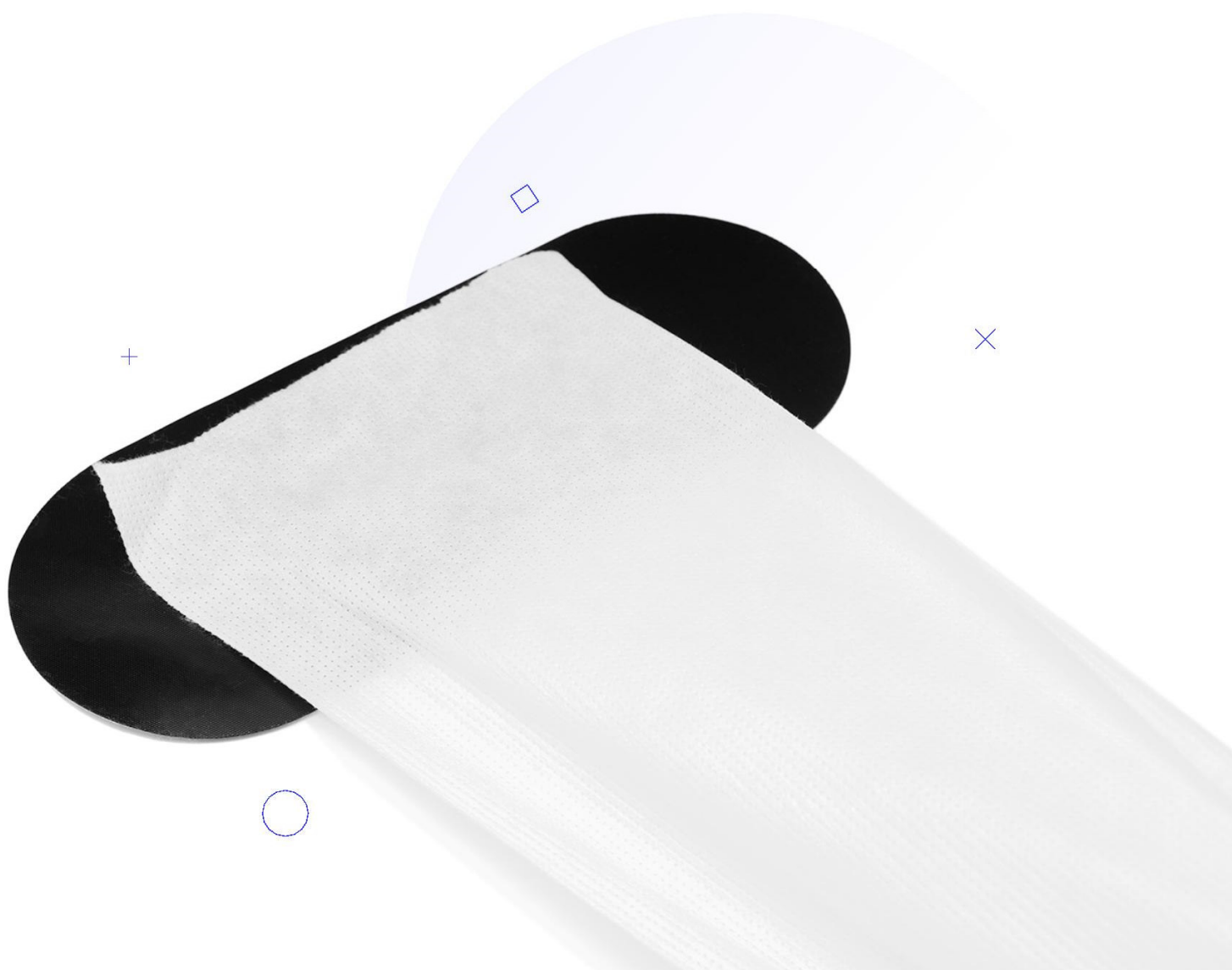

Ein Wendepunkt in der Patientenpositionierung



BEQUEM

Noch nie dagewesener Komfort für die Patientinnen und Patienten.




EINFACH ZU BEDIENEN

Schnelle Einrichtung, intuitive Bedienung, passt an jeden Tisch auf dem Markt.



SICHER UND HYGIENISCH

Einwegprodukte zum Einmalgebrauch

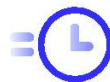

EFFIZIENT

Reduziert die Anzahl der Rescans und die Reinigungszeit.



ZUVERLÄSSIG

Hält die Position des Patienten gleichmäßig bei langen Eingriffen, Fixierung reduziert die Bewegung auf weniger als 1 mm.



VOLLSTÄNDIG

Von Kopf bis Fuß kompatibel mit jeder Lösung von bildgebender Modalität, einschließlich Ultraschall.

Ein einziges Produkt für jede medizinische Situation

NOTFALL

Flexible Einrichtung, schnelles Anhängen und hygienische Lösung für Notfall-CT. Scannen zu therapeutischen und interventionellen Zwecke.

DIAGNOSTISCH

Stabilisierung der Patientinnen und Patienten für eine verbesserte Bildqualität durch Reduzierung der Bewegungs-Artefakte bei MRT, CT, Röntgen, Ultraschall und Nuklearmedizin.

INTERVENTIONELLE RADIOLOGIE

Flexible Stabilisierung mit einem hohen hygienischen Standard, der für perkutan und minimal-invasive Eingriffe unbedingt erforderlich ist.

CHIRURGIE

Lange, bequeme Stabilisierung, die die hohen hygienischen Normen der minimalinvasiven, endoskopischen, laparoskopischen und traditionell offenen Chirurgie erfüllt.




Bevor Sie loslegen

Es gibt viele verschiedene iFIX-Produkte, welche kann nach Ihren Bedürfnissen kombiniert werden können.

Hier sind ein paar Punkte, die Ihnen bei der Auswahl behilflich sind.

Wie viele Teile hat iFIX?

Jedes iFIX-Setup besteht aus zwei verschiedenen Teilen die unterschiedlichen Zwecken dienen

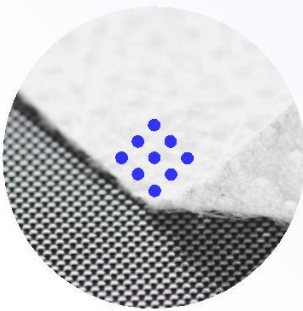

Klett-PRODUKTE (Patch) Mehrweg

Entwickelt für die Befestigung an jeder Art von medizinischem Tisch/Bett/Liege

+



VLIES-PRODUKTE (Fleece) Einwegartikel

Konzipiert für die Befestigung an jedem iFIX Klett-Produkt

=



iFIX

Sie brauchen Klett- und Vlies-Produkte, mit denen Sie Ihr individuelles iFIX-Set zusammensetzen können.

Wie wähle ich meine Klett- und Vliesprodukte aus?



Klett-produkte werden nach Ihren Bedürfnissen ausgewählt.

Wir haben Klettprodukte für alle großen Marken von medizinischen Tischen, und wir passen bei Bedarf die Produkte an oder erstellen sogar spezifische Formen für Ihren Tisch. Von Aufklebern, die an Kissen und der Tischunterseite haften, über Adapter zum Einstecken in Schienensysteme oder verfügbare Tischkanäle bis hin zu Patch-Adaptern.

Verbinden Sie vorhandene Klettbänder mit den Patches, die Möglichkeiten sind zahllos.



Vliesprodukte stabilisieren die Anatomie der Patientinnen und Patienten.

Sie variieren in Form und Größe je nach Körperteil. Beim Anlegen konturieren sie den Körper wie eine zweite Haut, dies sorgt für eine bequeme Positionierung und Stabilisierung.

iFIX eignet sich für jede Körperregion.




Ich kann kein iFIX-Klett Produkt finden, welches an meinen Tisch passt. Was soll ich tun?


Wir können Ihnen auf jeden Fall helfen. Senden Sie Ihr Tischmodell und Referenz-, Hersteller- und Nahaufnahmen an:

office@medstorm.at

Unser Produktteam wird Sie gerne beraten.

Gerne entwickeln wir eine maßgeschneiderte Lösung.

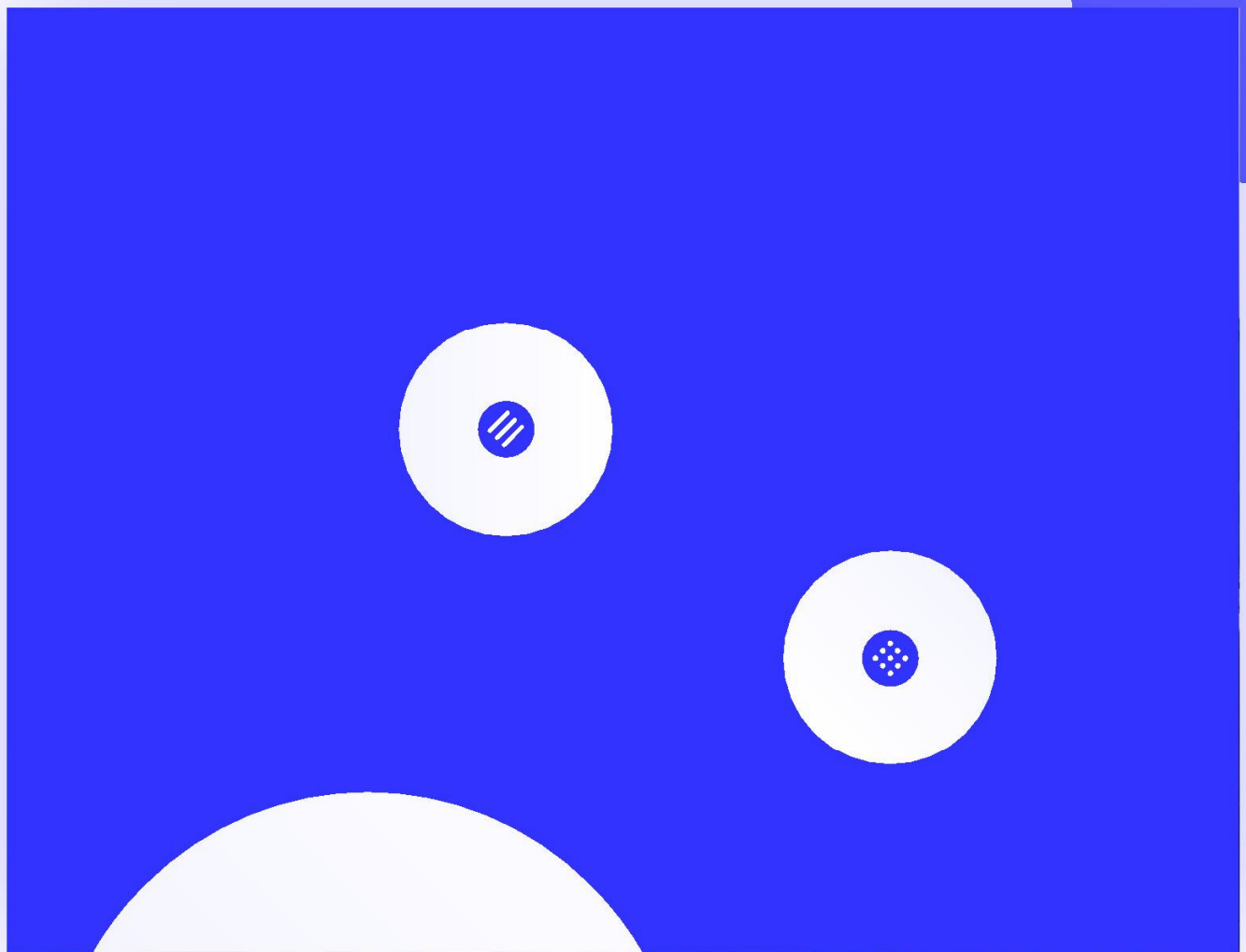

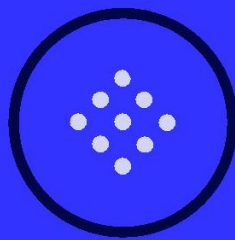

KLETT-PRODUKTE

(WIEDERVERWENDBAR)


Klett-Produkte

Klebeflächen, die auf jedem Tisch oder Lagerungsbehelf auf dem Markt haften.
Sie funktionieren mit jeder Art von iFIX-Vlies, um sicherzustellen, dass Ihr Patient richtig stabilisiert ist.

	PRODUKTNAME	REF-NR	LEISTUNGSBESCHREIBUNG
	iFIX Patch 15	16180L001	Menge: 8 Größe: 15 x 10 cm Haltbarkeit: 3 Jahre
	iFIX Patch 25	16180L002	Menge: 6 Größe: 25 x 10 cm Haltbarkeit: 3 Jahre
	iFIX Patch 50	16180L005	Menge: 4 Größe: 50 x 10 cm Haltbarkeit: 3 Jahre
	iFIX-Patch 75	16180L007	Menge: 4 Größe: 75 x 10 cm Haltbarkeit: 3 Jahre
	iFIX Patch 15x6	32982	Menge: 3 Größe: 15 x 6 cm Haltbarkeit: 3 Jahre

Schienen-Adapter

Schienen-Adapter gleiten in die Kanäle Ihres Tisches und machen die Integration in Ihre bestehende Ausstattung nahtlos möglich. Adaptionen zu den Führungsschienen sind verfügbar. Sie funktionieren mit jeder Art von iFIX-Vlies, um sicherzustellen, dass Ihr Patient richtig stabilisiert ist.

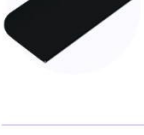	PRODUKTNAME	RefNR	LEISTUNGSBESCHREIBUNG
	iFIX Slot-Adapter 2.0/30	38037	Menge: 4 Größe: 30 x 12 cm, Ø 2,0 mm Haltbarkeit: 3 Jahre Empfohlen für: mehrere GE und Canon CT-Tische
	iFIX Slot-Adapter 3.0/30	17622L003	Menge: 4 Größe: 30 x 12 cm, Ø 3,0 mm Haltbarkeit: 3 Jahre Empfohlen für: mehrere Siemens und Philips CT-Tische
	iFIX Slot-Adapter 8.0/30	16192L003	Menge: 4 Größe: 30 x 12 cm, Ø 8,0 mm Haltbarkeit: 3 Jahre Empfohlen für: Interventionell Standard-Grundplatte des Systems
	iFIX Slot-Adapter 10.0/30	33224	Menge: 4 Größe: 30 x 12 cm, Ø 10,0 mm Haltbarkeit: 3 Jahre Empfohlen für: Siemens MR-Tische
	iFIX Slot-Adapter Trapez 12.0/9	35193	Menge: 8 Größe: 9 x 12 cm, Ø 12,0 mm Haltbarkeit: 3 Jahre Empfohlen für: Philips MR Tisch
	iFIX Slot-Adapter Flügel 3.0/30	39775	Menge: 4 Größe: 30 x 12 cm, Ø 3,0 mm Haltbarkeit: 3 Jahre Flügelförmiger Stab

Patch-Adapter

Patchadapter dienen als mechanische Brücke zwischen den verbauten Kletthaken Ihres Tisches (in der Regel unter der Tischmatratze zu finden) und den iFix Klettprodukten. Ideal für Tische, die keinen Platz zum Aufkleben von iFIX-Patches oder die Möglichkeit zum Anschließen von iFIX-Schienen-Adaptern haben.

	PRODUKTNAME	REF-NR	LEISTUNGSBESCHREIBUNG
	iFIX Patch Adapter 50	16179L001	Menge: 4 Größe: 50 x 15 cm Haltbarkeit: 3 Jahre

Normschienen-Adapter

Wenn Sie einen Operations- oder Bildgebungstisch haben, der mit seitlichen Normschienen ausgestattet ist, können Sie unsere Normschienenadapter verwenden, um eine Verankerungsposition für das iFIX-Vlies zu schaffen.

Sie funktionieren mit jeder Art von iFIX-Vlies, um sicherzustellen, dass Ihr Patient richtig stabilisiert ist.

	PRODUKTNAME	REF-NR	LEISTUNGSBESCHREIBUNG
	iFIX Side-Rail-Adapter	42642-EU	Menge: 4 Größe: 12,5 x 8 x 2 cm
	iFIX Side-Rail-Adapter Ersatz-Patch	44824	Anzahl: 10 Größe: 12 x 10,5 cm



VLIES-PRODUKTE

(EINWEG)

iFIX Fleece

Die biokompatiblen iFIX-Vliesprodukte bieten den Patientinnen und Patienten eine hautfreundliche Lösung. Die Vliese sind Einweg-Produkte, die eine Kreuzkontamination verhindern und die hygienischen Bedingungen verbessern.

Sie können so zugeschnitten werden, dass sie sich an die Bedürfnisse des Eingriffsteams optimal anpassen und die Patientinnen und Patienten für die Dauer eines Eingriffs unterstützen. Die Patienten können so in der jeweils erforderlichen Position stabilisiert werden.

	PRODUKTNAME	REF-NR	LEISTUNGSBESCHREIBUNG
	iFIX Fleece 5	31618	Menge: 1 Größe: 5 cm x 30 m Haltbarkeit: 3 Jahre Auch geeignet für pädiatrische Patienten
	iFIX Fleece 15	16304	Menge: 1 Größe: 15 cm x 200 m Haltbarkeit: 3 Jahre Auch geeignet für pädiatrische Patienten
	iFIX Fleece 50	17674	Menge: 1 Größe: 50 cm x 30 m Haltbarkeit: 3 Jahre

iFIX Spider-Fleece

Das iFIX Spider Fleece hat alle Vorteile eines normalen iFIX Vlieses, ist aber durch seine besondere Form für die Positionierung bestimmter kompletter Körperregionen wie Arme, Beine und Rumpf besser geeignet. Diese Vlies-Lösung ermöglicht eine individuelle Stabilisierung verschiedener kompletter Körperregionen, ohne die Bildgebung oder den Eingriff negativ zu beeinflussen. Deshalb ist es möglich, jenes Vliessegment, welches das Eingriffsfeld verdeckt, unter Beibehaltung der entsprechenden Stabilisierung zu entfernen. Es ist somit ideal für interventionelle und chirurgische Anwendungen.

	PRODUKTNAME	REF-NR	LEISTUNGSBESCHREIBUNG
	iFIX Spider-Fleece Arm M	40286	Menge: 1 Größe: 50 x 45 cm Haltbarkeit: 3 Jahre Vorgesehene Körperregion für die Verwendung: Arm
	iFIX Spider-Fleece Bein M	40287	Menge: 1 Größe: 75 x 75 cm Haltbarkeit: 3 Jahre Vorgesehene Körperregion für die Verwendung: Bein
	iFIX Spider-Fleece Körper S	40288	Menge: 1 Größe: 100 x 90 cm Haltbarkeit: 3 Jahre Vorgesehene Körperregion für die Anwendung: ganzer Oberkörper
	iFIX Spider-Fleece Körper M	40289	Menge: 1 Größe: 125 x 90 cm Haltbarkeit: 3 Jahre Vorgesehene Körperregion für die Anwendung: ganzer Oberkörper
	iFIX Spider-Fleece s Körper L	40290	Menge: 1 Größe: 150 x 90 cm Haltbarkeit: 3 Jahre Vorgesehene Körperregion für die Anwendung: ganzer Oberkörper
	iFIX Spider-Fleece Körper XL	40291	Menge: 1 Größe: 175 x 90 cm Haltbarkeit: 3 Jahre Vorgesehene Körperregion für die Anwendung: ganzer Oberkörper


iFIX Kopfmaske

Die iFIX-Kopfmaske wurde speziell entwickelt, um den Kopf perfekt zu stabilisieren, indem sie Stirn und Kinn bedeckt, sowohl für einen ungehinderten Zugang für das medizinische Team als auch für ein komfortables Empfinden für die Patientinnen und Patienten.

Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir Ihnen, die Kopfmasken mit speziellen iFIX-Klettprodukten zu kombinieren: Patch 15x6 (REF 32982) der am Kopfkissen befestigt wird.

	PRODUKTNAME	REF-NR	LEISTUNGSBESCHREIBUNG
	iFIX Kopfmaske XS	26102	Anzahl: 10 Größe: 33 x 41 cm Haltbarkeit: 3 Jahre Geeignet für pädiatrische Patienten
	iFIX Kopfmaske S	26105	Anzahl: 10 Größe: 33 x 43 cm Haltbarkeit: 3 Jahre Geeignet für pädiatrische Patienten
	iFIX Kopfmaske M	26104	Anzahl: 10 Größe: 33 x 45 cm Haltbarkeit: 3 Jahre
	iFIX Kopfmaske L	26103	Anzahl: 10 Größe: 33 x 47 cm Haltbarkeit: 3 Jahre
	iFIX Kopfmaske XL	29341	Anzahl: 10 Größe: 33 x 49 cm Haltbarkeit: 3 Jahre
	iFIX Kopfmaske L verlängert*	35080	Anzahl: 10 Größe: 33 x 62 cm Haltbarkeit: 3 Jahre

→ * Eine verlängerte Klappe auf der Rückseite ermöglicht die Stabilisierung des Kopfes, wenn der Befestigungspunkt für das Klettprodukt zu weit vom Kopf entfernt ist

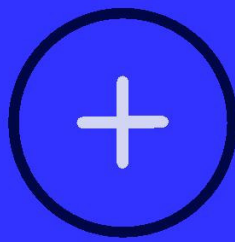

ZUBEHÖR

Zubehör

	PRODUKTNAME	REF-NR	BESCHREIBUNG
	iFIX Fleece 15 Spender	49067-15	Der iFIX Fleece 15 Spender ist ein wandmontierter Spender für eine 200m iFIX Fleece 15 Rolle. Mit diesem Spender müssen keine Kartons in den Bildgebung- oder Operationssaal.
	Fusselrolle	31917	Der Fusselroller wird vor den Reinigungs- und Desinfektionsschritten zum Entfernen von Rückständen aus den iFIX Klett-Produkten verwendet.
	iFIX Cutter Konventionell	31913	Der iFix Cutter konventionell verfügt über eine Klinge aus Edelstahl
	iFIX Cutter MR Safe	31916	Der MR Safe Cutter ist mit einer Keramik Klinge ausgestattet, um sicherzustellen, dass keine Wechselwirkung zwischen dem Cutter und dem magnetischen Feld innerhalb des MRT-Raumes auftreten können,

Nachtrag

Klett-Produkte Reinigungshinweise:

Reinigen Sie die iFIX Klettprodukte nach Entfernung von Flusen und Fremdkörpern mit einem alkoholischen (z.B. 70% Isopropylalkohol) oder Quartär-Ammonium-basierten, sprühbaren Reinigungsmittel:

1. Sprühen Sie die iFIX Patches mit dem Reinigungsmittel gleichmäßig ein
2. Halten Sie sich genau an die vorgeschriebenen Einwirkzeiten des Herstellers des Desinfektionsmittels.
3. Untersuchen Sie die Oberflächen auf sichtbare Vlies-Reste.
Wenn noch Schmutz vorhanden ist, wiederholen Sie die Reinigung.

Häufig gestellte Fragen

WIE VIEL SPART IFIX IN MEINER PRAXIS?

Bewegungsartefakte verursachen die Wiederholung von bis zu 29,4% aller MRTs (1). Eine Umfrage zeigte, dass wiederholte CT-Scans mehr als einmal pro Arbeitstag durchgeführt werden (2).

iFIX reduziert verwackelte Bilder, die durch Artefakte oder Bewegung verursacht werden. Wenn Ihre Praxis auch nur eine erneute CT- oder MRT- Untersuchung pro Woche einspart, kann iFix Ihnen viel Geld und Zeit sparen.

Denn für jede sonst wiederholte Untersuchung können weitere Patientinnen oder Patienten untersucht werden, wodurch die Wartezeiten oder allfällige Überstunden einzusparen sind.

WIE HOCH SIND DIE KOSTEN VON IFIX PRO EINGRIFF?

Die Kosten von iFIX hängen stark davon ab, welches Körperteil Sie versuchen, sich zu positionieren, wie groß Ihr Patient ist, und die Art des Verfahrens, das Sie anwenden.

Um die Kosten für die Lagerung der Patienten mit den hygienischsten, komfortabelsten und einfachst zu bedienenden Behelf zu definieren, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

IST DAS VLIES BIOKOMPATIBEL?

Ja. Das Vlies ist zu 100% biokompatibel.

WELCHER BELASTUNG HÄLT DAS VLIES STAND?

Ein 50 cm breites Vlies, das an einem 50 cm langen Patch befestigt ist hält mehr als 100 kg.

KANN IFIX PATIENTINNEN UND PATIENTEN IN JEDER POSITION HALTEN?

Ja. iFIX kann Patienten in jeder typischen Position, die das medizinische Team für richtig hält halten, vorausgesetzt, dass entsprechende iFIX-Produkte ausgewählt werden und eine adäquate Positionierung durchgeführt wird. Zusätzlich muss immer auch eine grundsätzliche Absicherung durchgeführt werden.

KANN IFIX UNKOOPERATIVE ODER AGGRESSIVE PATIENTINNEN UND PATIENTEN HALTEN? ODER SEDIERTE PATIENTEN, DIE UNWILLKÜRLICHE BEWEGUNGEN MACHEN?

iFIX ist ein Positionierungssystem und keine Fixierung oder Rückhaltesystem. Um diese Patienten am Tisch zu sichern, müssen Sie immer auch zusätzlich Leder- oder Kunststoffgurte verwenden.

WIE LANGE HALTEN DIE KLETTPRODUKTE?

Jedes Klettprodukt kann bei 1000 Positionierzyklen verwendet werden, wenn sie gemäß der mitgelieferten Gebrauchsanweisung gepflegt und gereinigt werden. Nach spätestens 3 Jahren muss jedes Klett-Produkt ausgewechselt werden. Fragen Sie nach einer Service-Option..



WIE ENTFERNE ICH DIE PATCHES, WENN SIE ERSETZT WERDEN MÜSSEN?

Biegen Sie sie vorsichtig eine Ecke auf und ziehen Sie den Patch langsam ab. Die Klebeflächen lassen sich leicht, ohne Gewalt abziehen. Wenn Rückstände auf Ihrem Tisch zurückbleiben, verwenden Sie Standard-Wartungs- und Reinigungsmittel um diese zu entfernen.

¹ Andre JB, Bresnahan BW, Mossa-Basha M, Hoff MN, Smith CP, Anzai Y, Cohen WA. Zur Quantifizierung der Prävalenz, Schweregrad und Kosten im Zusammenhang mit der Bewegung des Patienten während Klinische MR-Untersuchungen. J Am Coll Radiol. 2015 Juli; 12(7):689–95.doi: 10.1016/j.jacr.2015.03.007. Epub 2015 Mai PMID: 5963225.

² Interne Umfrage, die von Beekley Medical im Januar 2020 durchgeführt wurde.

Wird die Herstellergarantie meines Tisches durch DAS ANBRINGEN DER IFIX-KLETTPRODUKTE beeinflusst? Erlischt die Herstellergarantie?

Im Allgemeinen nein. Nichtsdestotrotz sollten Sie sich immer beim Hersteller des Tisches erkundigen.

WELCHE BILDGEBUNGSMODALITÄTEN SIND MIT IFIX-KOMPATIBEL?

CT, Fluoroskopie, MRT, Nuklearmedizin und Ultraschall.

KANN IFIX FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN IM OP VERWENDET WERDEN UND KANN ES STERILISIERT WERDEN?

iFIX kann für Patienten im OP eingesetzt werden.

iFIX kann nicht sterilisiert werden.



INTERVENTIONAL
SYSTEMS

Bleiben Sie in Kontakt

office@medstorm.at
www.medstorm.at